

Cryolipolysis / Velashape MED-360+

Amincissement corporel, renouvellement de la peau

M O D E D ' E M P L O I



Version: 100601 1.0
cryolipolyse / vacuum / RF 13 MHz / LED / roller

La dernière version de cette brochure est disponible sur notre site
www.opthom.com dans l'espace professionnel

Traduction basée sur le document original du fabricant

Préface

L'appareil de renouvellement cutané et d'amincissement corporel MED-360+ est un produit de haute technologie, avec un droit de propriété intellectuel.

Ce manuel est applicable à l'appareil de base MED-360 qui vise à réduire la graisse et la cellulite.

Vérifiez les accessoires fournis. En cas de manquement d'accessoires, veuillez prendre contact avec nous selon les informations mentionnées au chapitre 1.

Indications aux utilisateurs

1. Si vous utilisez l'appareil MED-360 pour la première fois et avant sa mise en marche, assurez vous d'avoir bien lu et compris le présent manuel.
2. Il est conseillé d'utiliser l'appareil MED-360 hors de tout champ d'interférence électromagnétique, de vibration ou d'autres conditions environnementales présentant des interférences. Lors de l'utilisation, l'appareil de radio fréquence ne doit pas interférer avec d'autres appareils.
3. Pour des raisons de sécurité, veuillez faire attention aux notes et avertissements mentionnées en rouge. Ces notes et avertissements sont nécessaires pour une utilisation correcte et en toute sécurité de l'appareil. Vous bénéficierez d'un meilleur et plus efficace rendement de la machine.
4. Afin d'éviter toute pollution environnementale, les pièces détachées résultant du démantèlement ou du remplacement de l'appareil à Radio fréquence doivent être déposées chez un agent ou une société spécialisée en traitement des déchets.
5. Toute l'information contenue dans le présent document est protégée par la loi sur les droits d'auteur. Ce document ne peut donc être reproduit ou sauvegardé dans une base de données ou un système de récupération de données, par une société ou un individu, sans en avoir reçu auparavant notre autorisation écrite.



NOTES

La lecture de ce manuel est requise avant toute utilisation de l'appareil!

Table des matières

Description de l'appareil	5
Principe thérapeutique	10
Installation	14
Instruction d'utilisation	18
Entretien et dépannage	27
Spécificités	28

Description de l'appareil

L'appareil d'amincissement et de renouvellement cutané MED-360+ est un système non invasif, une machine esthétique unique, qui adopte la technologie avancée MED-360+ couvrant la cryolipolyse, la radio fréquence bi-polaire 13 MHz, la lumière LED, un système automatique de palper rouler. Cet appareil permet de répondre aux attentes des clients en matière de réduction de cellulite, de raffermissement cutané, d'atténuation des rides et d'amincissement. Grâce à cet appareil, les clients bénéficient de services qui les aideront à se sentir mieux, vivre mieux, s'apprécier.

Les modules de haute technologie suivants ont été utilisés pour cet appareil:

- **La cryolipolyse:** basée sur le principe que les cellules sont plus vulnérables au refroidissement que les tissus environnants. Un applicateur non invasif est placé sur la zone à traiter pour extraire l'énergie des tissus graisseux sous-jacents, tout en protégeant la peau, les nerfs, les muscles et autres tissus. Les cellules graisseuses refroidies entraîne l'apoptose (destruction contrôlée des cellules) et sont progressivement éliminées, réduisant ainsi l'épaisseur de la couche graisseuse.
- **Circuit électronique pour adaptation d'impédance:** le circuit permet de détecter automatiquement l'impédance des tissus des différentes parties traitées. Il ajuste l'impédance du circuit électronique interne, permettant de maximiser l'énergie RF émise par la couche la plus profonde des tissus en évitant de produire une surchauffe de la peau.
- **Technologie intense de massage par pression négative de palper rouler:** un massage intense par pression négative de palper-rouler aide à la production de collagène et l'obtention de meilleurs résultats thérapeutiques sur les rides.
- **Panneau d'affichage tactile LCD:** Interface intuitif à écran tactile avec des soins pré programmés faciles d'utilisation. Les paramètres de traitement peuvent être ajustés soit sur l'écran tactile LCD soit sur la pièce de traitement facilement actionnable par tout utilisateur, du débutant au confirmé.
- **Technologie RF bi-polaire:** la radio fréquence bi-polaire pénètre plus profondément les tissus de la peau et aide à la production de collagène. Excellent traitement des rides, cette technologie permet aussi la réduction du volume de collagène, offrant ainsi un meilleur effet amincissant.



ATTENTION

Pour éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, ne pas exposer l'appareil à la pluie ni à l'humidité

1.1. Instruction de sécurité

1. L'appareil ne peut être actionné que par des utilisateurs qualifiés qui ont reçu une formation spécifique préalable.
2. S'assurer que la tension indiquée sur la plaque d'identification est conforme à la tension admise.
3. Ne pas utiliser l'appareil sur un sol poussiéreux ou incliné, ni dans un environnement humide.
4. Ne pas insérer de corps solide ou liquide sous peine de créer des dégâts à l'appareil.
5. Toujours s'assurer que l'intensité de RF sélectionnée est bien adaptée à la peau.
6. Ne pas utiliser les têtes de travail sur certaines parties sensibles du corps (yeux, oreilles, etc.). Faire particulièrement attention aux parties fragiles.
7. Respecter les durées de traitement recommandées.
8. Ne pas utiliser l'appareil à d'autres fins que celles spécifiées dans le manuel d'utilisation.
9. Notre société décline toute responsabilité pour des dommages engendrés par une utilisation incorrecte de l'appareil.


1.2. Le contenu du colis

Dès réception de l'appareil, veuillez passer en revue toutes les parties de l'appareil telles que mentionnées sur la liste des composantes du colis. Nous contacter immédiatement en cas de pièces perdues ou endommagées dans le colis.

Nom	Spécification	Quantité	Remarque
Corps principal		1 set	
Tête de travail principale		1 pc.	avec l'appareil
Tête de travail auxiliaire		3 pcs.	avec l'appareil
Elément de filtre		4 pcs.	avec l'appareil
Cordon électrique	3 mètres	1 pc.	
Mode d'emploi		1 pc.	


1.3. Description de l'appareil

1.3.1. Face avant

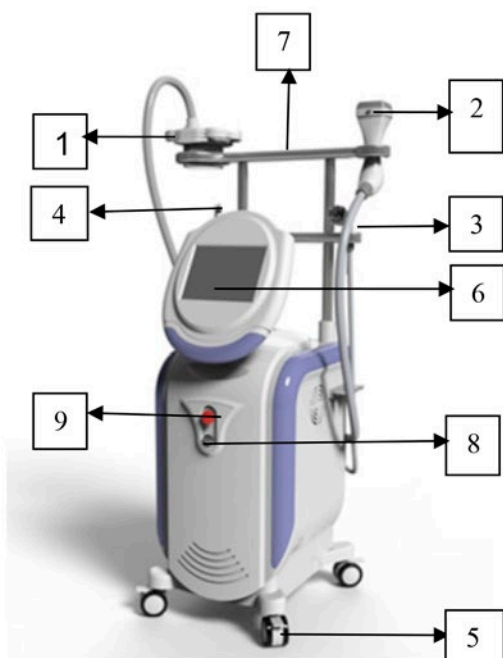

1. Pièce à main A
2. Pièce à main B
3. Pièce à main C
4. Pièce à main D
5. Roue à usage médical
6. Ecran couleur tactile 10.4"
7. Poignée
8. Clé de contact
9. Bouton d'arrêt d'urgence

1.3.2. Face arrière

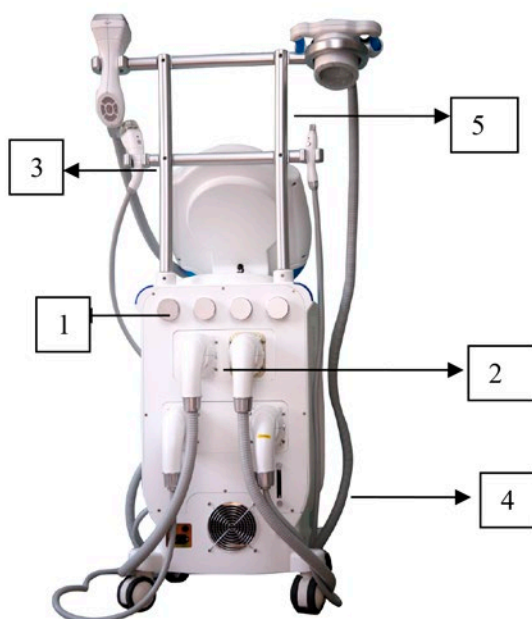

1. Capot des 4 filtres
2. Prise pour les pièces à main
3. Support pour les pièces à main C et D
4. Tube de la pièce à main
5. Support de la pièce à main


1.4. Les têtes de travail de traitement

1.4.1. Tête de travail principale (pièce à main A)

La lumière LED chauffe les fibroblastes des tissus connectifs afin d'accélérer le renouvellement du collagène et des fibres élastiques. Elle accélère la circulation sanguine qui facilitera le métabolisme des cellules graisseuses.

Le palper-rouler ajustable est la technique de base de massage en profondeur par pression négative. Grâce à une aspiration en profondeur de divers niveaux, contrôlée par micro-ordinateur, les tissus sous cutanés sont stimulés et l'épiderme est plus doux. La pièce à main, grâce à son intensité modulable, présente en outre différentes options de traitement. Touche 'aspiration' et 'relachement' sur l'écran.

Le système de refroidissement permet de diminuer la température de la peau durant le traitement (les cellules sont plus sensibles au refroidissement que les tissus environnants).

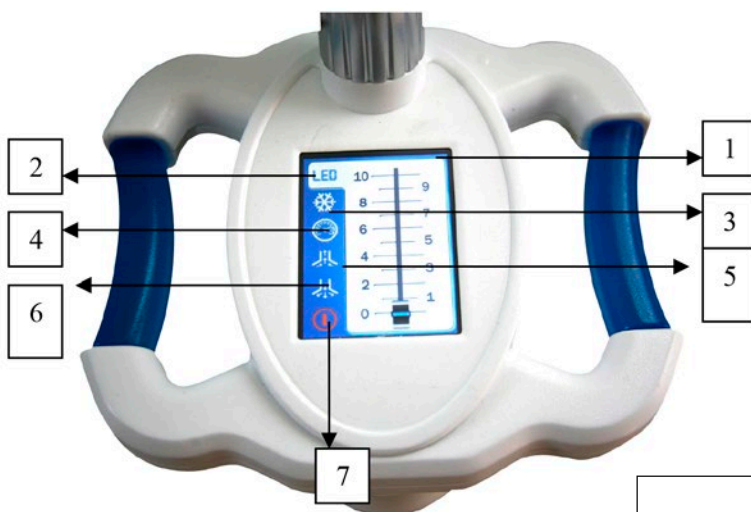

1. Interface de travail pour la pièce à main A
2. Bouton d'ajustement de lumière LED
3. Bouton d'ajustement du refroidissement
4. Bouton d'ajustement de l'intensité du palper-rouler
5. Bouton d'ajustement de pression
6. Bouton d'ajustement du dépression
7. Mise en marche / Arrêt

1.4.2. Têtes de travail auxiliaires (B/C/D)

La tête de travail auxiliaire permet de:

- détecter l'impédance des tissus traités,
- mettre en relation avec l'impédance de la machine afin de maximiser la pénétration de la radio fréquence dans les tissus,
- adopter l'aspiration du palper-rouler pour modeler la peau en assurant le contact et l'alignement du derme avec la trajectoire de la radio fréquence.

La combinaison du positionnement du palper rouler aide à concentrer la chaleur en profondeur dans le derme, permettant ainsi la contraction et le renouvellement du collagène. Le résultat est visible; traitement efficace et indolore.



Principe de base

2.1. Principe de la technologie Med-360+

La technologie MED-360+ avec Cryolipolyse, Radio Fréquence bi polaire, palper rouler par massage à pression négative, massage motorisé est un traitement médico-esthétique très efficace, sûr et indolore. Elle offre aux praticiens des solutions avancées pour une large gamme d'applications telles que mise en forme, amincissement, bien être, soin visage et traitement de la cellulite.

Cryolipolyse: Pièce à main A. Basée sur le principe que les cellules adipeuses sont plus vulnérables au refroidissement que les tissus environnants. Un applicateur non invasif est placé sur la zone à traiter pour extraire l'énergie des tissus gras sous-jacents, tout en protégeant la peau, les nerfs, les muscles et autres tissus. Les cellules adipeuses refroidies entraînent l'apoptose (destruction contrôlée des cellules) et sont progressivement éliminées, réduisant ainsi l'épaisseur de la couche grasseuse.




Lors du traitement, la tête de travail utilise l'aspiration du palper-rouler pour modeler la texture de la peau. **En ajustant automatiquement l'impédance de couplage de la tête de travail, la radio fréquence bi-polaire peut être directement émise au travers du derme.**

La combinaison du palper-rouler et de la thermo-thérapie RF émet de la chaleur au plus profond du derme, stimule la production de nouveau collagène et améliore la texture de la peau. Les rouleaux motorisés de la tête de travail permettent un meilleur massage de la peau. Le résultat est fidèle aux attentes; traitement efficace et indolore.

Le traitement est rapide; il ne requiert ni anesthésie ni un temps de récupération prolongé. Les clients peuvent reprendre leurs activités normalement après le traitement.

tement. La technologie du MED-360+ améliore l'élasticité de la peau avec des résultats à long terme. La procédure consiste en un traitement unique de 30 à 40 minutes, selon la zone à traiter.

Application and Treatment principle:

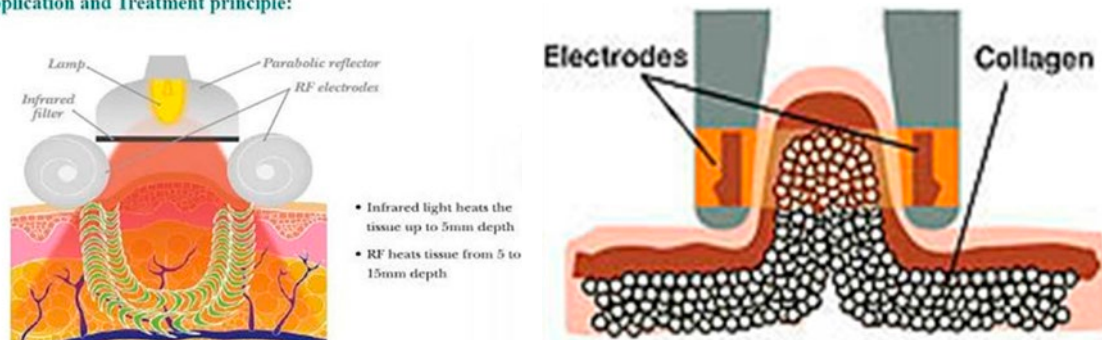

Après le traitement, la peau peut rougir pendant 2 à 3 jours. La plupart des clients peuvent reprendre leurs activités immédiatement après le traitement, sans soins particuliers ni temps d'immobilisation.

Les effets du traitement sont durables et restent visibles.

2.2. Fonctions de la machine

Les traitements MED-360+ aident à traiter les peaux relâchées et ridées ainsi que la cellulite corporelle. Le traitement est souvent utilisé pour tonifier les peaux fines, relâchées ainsi que le haut des bras. Il offre également de beaux résultats sur l'abdomen, la poitrine, les seins ou les cuisses, après une opération chirurgicale ou un accouchement.

Grâce aux technologies combinées du MED-360+, la machine offre une réjuvenation de la peau et une solution à l'élimination de la cellulite.

2.2.1. Amincissement

La radio fréquence permet de:

- chauffer les cellules graisseuses de 5 à 15 mm,
- permettre la propagation des molécules d'oxygène,
- améliorer les échanges inter-cellulaires
- aider le métabolisme de la graisse
- re-distribuer l'eau et la glycérine.

Le palper rouler mécanique augmente l'apport sanguin et aide à libérer des enzymes lors du métabolisme des tissus gras.

La chaleur émise aide au métabolisme des cellules grasses et à l'élimination du liquide gras. Après élimination de ce liquide, les cellules grasses rétrécissent et créent ainsi une silhouette affinée et amincie.

2.2.2 Réduction de la cellulite

La graisse sous cutanée se présente sous forme de lobes gras séparés par des fibres de collagène. Lorsque ces lobes gonflent et s'élargissent avec la graisse, ils prennent la forme caractéristique de la cellulite. La cellulite se retrouve généralement sur les zones problématiques des femmes (ventre et cuisses). Pour un traitement efficace de la cellulite, il ne suffit pas de réduire les cellules grasses, mais aussi de renforcer et resserrer les fibres de collagène.

Le MED-360+ traite la cellulite en dirigeant directement la RF vers les cellules grasses des zones concernées, et en travaillant conjointement avec la technologie du palper-rouler qui améliore la circulation sanguine et l'apport d'oxygène dans le sang. La machine chauffe les cellules adipeuses des couches plus profondes de la peau (hypoderme), accélérant ainsi l'élimination du liquide gras et la réduction de leur taille. Elle participe également au resserrement des fibres de collagène aidant ainsi la peau à reprendre sa forme initiale. En augmentant le taux de production de ces fibres, les résultats cliniques à long terme montrent une peau plus douce et affinée ainsi qu'une réduction de l'apparence de la cellulite.

2.2.3. Resserrement de la peau et atténuation des rides

La radio fréquence permet de chauffer les tissus les plus profonds de la peau. Elle aide à la production de collagène et à l'amélioration de la circulation sanguine. Elle entraîne ainsi le resserrement cutané et l'atténuation des rides. La production de collagène est stimulée. La peau est plus douce et son apparence affinée.

2.3. Contre-indications

- Cancer, maladies cardiovasculaires, cérébrovasculaires, infectieuses ou mentales.
- Dermate ou une infection sur la zone à traiter.
- Mauvaise cicatrisation de blessure ou une lésion sur la zone à traiter.
- Varicosités.
- Maladie cardiaque grave ou en hypertension ($\geq 140/90$ mmHg)
- Traces de coups ou de paralysie.
- Problèmes de coagulation sanguine ou en traitement anti-coagulant.
- Maladie nerveuse périphérique diabète ou maladie des tissus connectifs.
- Soumis au moins 1 fois à un traitement de radiation.
- Femmes enceintes ou indisposées.




Installation

3.1. Instructions et critères d'installation

- 1) La machine doit être installée dans une pièce aérée, propre et sur un sol lisse.
- 2) La température de la pièce ne peut excéder 30°C.
- 3) L'humidité ambiante doit être comprise entre 40 et 60%. L'utilisation d'un air conditionnée est conseillé. Pour les pièces trop sèches et en cas d'utilisation du chauffage central, l'utilisation d'un humidificateur est conseillée.
- 4) Afin de permettre à l'air de circuler favorablement vers et hors de la machine, la machine ne doit être placée près d'un mur.
- 5) Emplir le réservoir d'eau à l'aide d'eau distillée.
- 6) Laisser la machine inerte pendant 12 heures afin de permettre l'élimination de toute humidité éventuelle résultant d'un long transport.

3.2. Procédures d'installation

3.2.1. Installation du support

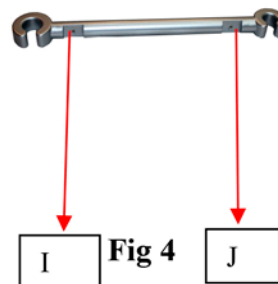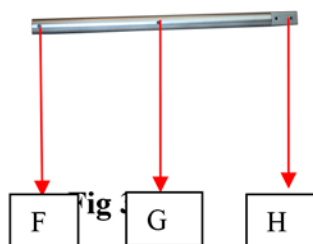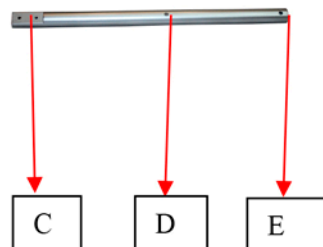

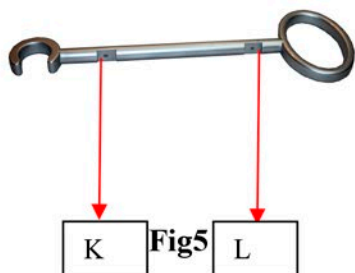


Fig 6

Installation

- Insérer respectivement les pièces E et F dans L et K et serrer les vis;
- De la même façon, insérer D et G dans I et J et serrer les vis;
- Enfin, insérer D et H dans A et B et serrer les vis (voir figure 6).

3.2.2. Connexion des pièces à main de la machine

1. Presser les deux boutons gris de chaque côté de la pièce à main.



A



B



C



D

2. S'assurer que les pointes de contact sont bien positionnées.
3. Serrer la vis.



ATTENTION

Procédure d'installation identique pour les autres pièces à main.

3.2.3. Emplissage d'eau



A

B



C



D



Fenêtre de niveau d'eau

Installation

1. Insérer B dans C
2. Insérer A dans D (cfr 3 dans figure 3)
3. Emplir d'eau

Vérifier simultanément le niveau d'eau. Quand l'eau a atteint 80 à 90 % de la jauge, arrêter de verser l'eau.



ATTENTION

1. *Utiliser de l'eau distillée ou sans hydrogène. Eau minérale strictement interdite.*
2. *Remplacer l'eau tous les 2-3 mois.*

3.2.4. Montage des éléments des filtres

La machine est pourvue de 4 filtres. Chaque filtre est livré avec ses éléments. Les filtres sont disposés de gauche à droite et correspondent respectivement aux pièces à mains A, B, C et D. Avant d'utiliser la machine, insérer chaque élément dans son filtre et serrer le bouton (voir fig. ci dessous Bouton du filtre, élément du filtre)



Instruction d'utilisation

4.1. Mise en marche de la machine

Connectez le câble d'alimentation. Appuyez sur le bouton de mise en marche à l'arrière de la machine, le ventilateur de refroidissement se met en route.

4.2. Introduction aux écrans

4.2.1. L'écran de veille




Cet écran apparaît après 10 secondes d'inactivité


4.2.2. L'écran d'accueil




Sélectionner le traitement souhaité

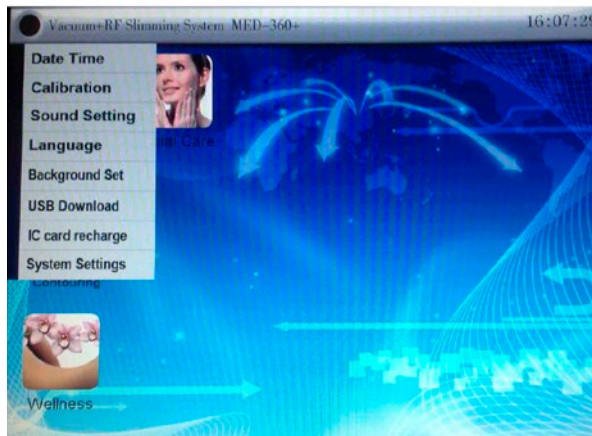


Appuyer sur le bouton gris pour entrer dans le système

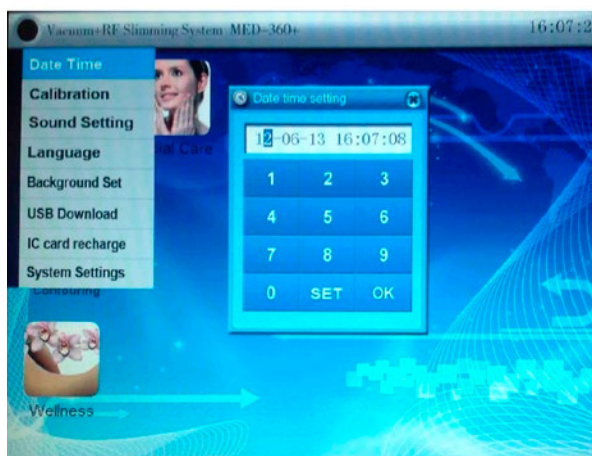


Insérer la date et l'heure. Ces indications apparaîtront ensuite sur l'écran. En cas d'erreur de programmation de l'heure, une correction peut être apportée.

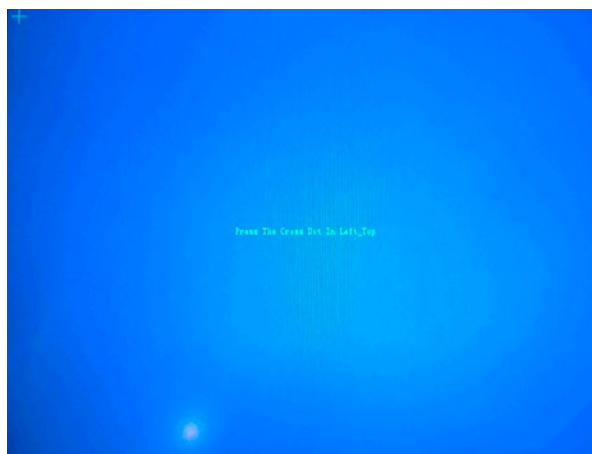


Parfois, suite au transport, l'écran ne répond pas toujours correctement. Ex: B apparaît quand A sélectionné. Il faut alors appuyer sur le bouton de calibrage (en haut de la liste du menu ci-dessus). L'écran ci contre apparaît. Appuyer sur le bouton en croix en haut à gauche '+'. Cette manipulation de calibrage n'est à effectuer qu'en cas de dysfonctionnement de l'écran. Il est recommandé de ne pas l'utiliser autrement.

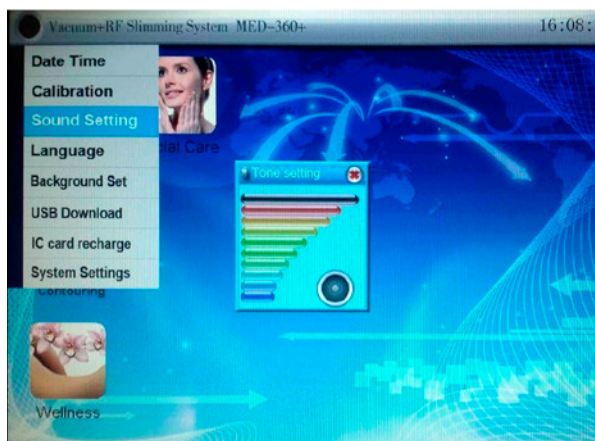


Ce bouton permet le réglage sonore (divers niveaux de son et fonction muette disponibles).

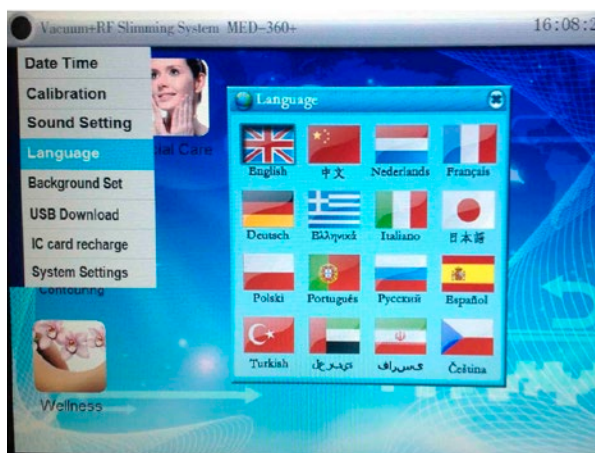

Sélection de la langue.

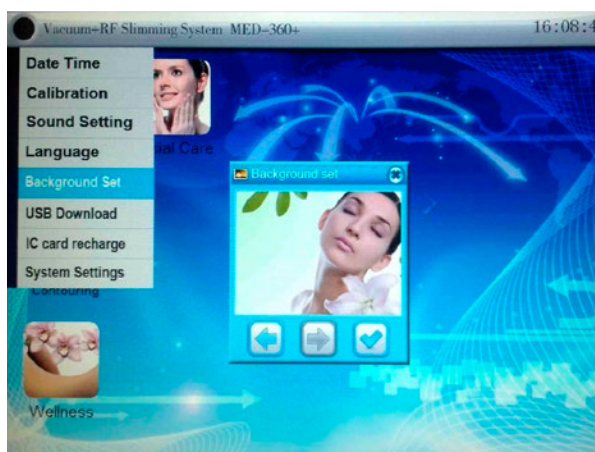

Sélection de l'arrière plan parmi 10 propositions.

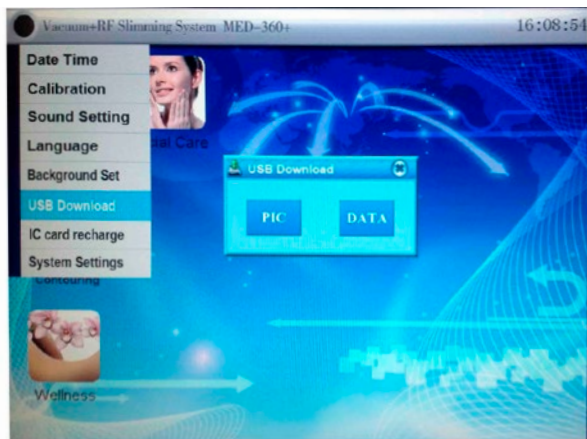


PIC

Sélection de l'interface à télécharger.


DATA

Sélection des données à télécharger.

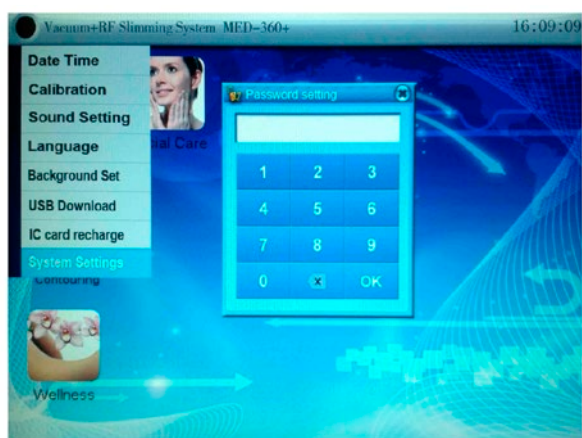


Encodage d'un mot de passe.

4.2.3. Interface de critères de traitement (fig.2)

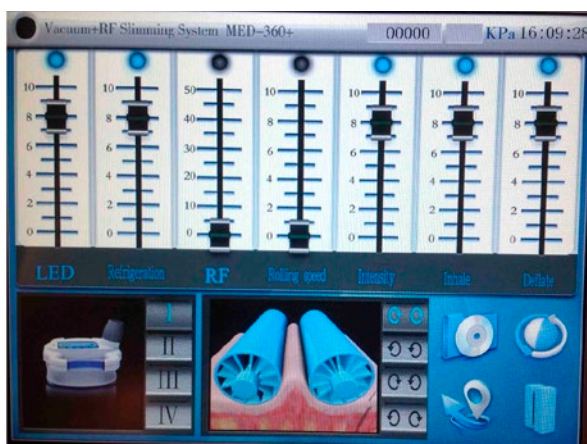

Cet écran apparaît après sélection du traitement.

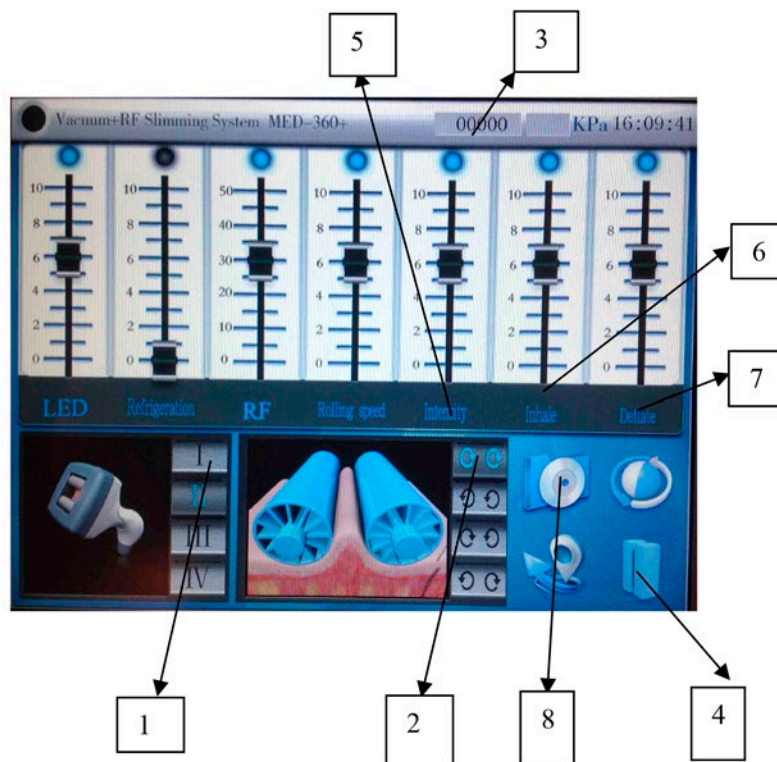

1. Choix des différentes pièces à main
2. Direction de travail des roulettes. (droite, gauche, intérieur, extérieur)
3. Compteur du traitement
4. Bouton de mise en marche / veille
5. Intensité (puissance du palper rouler)
6. Aspiration (temps nécessaire au réservoir pour laisser entrer l'air)
7. Expiration (temps nécessaire au réservoir pour laisser sortir l'air)
8. Pour stocker les paramètres de différents clients, appuyer sur ce bouton.

Selon les besoins du client, il convient d'actionner un bouton spécifique du menu de traitement (voir fig. 2). La machine affichera les paramètres du traitement choisi. Dans le menu des paramètres de traitement, un traitement peut être sélectionné. Suite à des recherches et les résultats d'études cliniques sur divers clients, la machine est programmée avec une dizaine de paramètres de traitement. L'opérateur peut choisir les paramètres du traitement selon les besoins de son client. En appuyant sur le bouton des paramètres de traitement, la machine affichera automatiquement l'interface du menu des paramètres (voir fig. 3).

Donnée de temps: Afin d'assurer un entretien et nettoyage adéquat de la machine

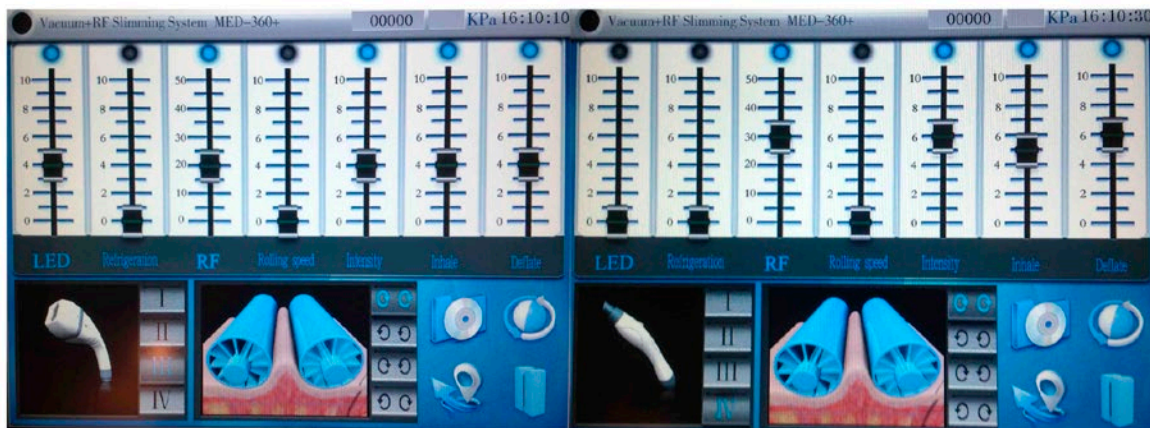


Fig. 3

après une certaine période de temps de travail, la machine affiche les données de temps dans le bas de l'écran du menu des traitements (voir fig. 2)

- a) **Durée total de travail de la machine:** enregistrement du temps de travail total de la machine depuis sa mise en installation
- b) **Temps de travail de la tête de travail principale:** enregistrement du temps de travail de la pièce à main principale RM1. Après 50 heures de travail, la machine mentionnera à l'opérateur la nécessité de nettoyer le filtre de la pièce à main principale et ses divers éléments. Après nettoyage, l'opérateur pourra réinitialiser le compteur du temps de travail.
- c) **Temps de travail des pièces à main secondaires:** enregistrement du temps de travail des pièces à main secondaires.. Après 50 heures de travail, la machine mentionnera à l'opérateur la nécessité de nettoyer le filtre des pièces à main secondaires et leurs divers éléments. Après nettoyage, l'opérateur pourra réinitialiser le compteur du temps de travail.

4.3. Procédure de traitement

4.3.1. Avant le traitement

- **Interroger:**
Une communication efficace avec le client permet de comprendre la situation actuelle des problèmes de peau du client, sa résistance à la douleur, ses attentes par rapport au traitement, l'état psychologique du client et de juger si le traitement permettra d'atteindre les résultats désirés. Le plus important est de confirmer si le client est apte à recevoir le traitement.
- **Observer**
Sur base de la communication avec le client et l'observation de sa peau, il convient d'analyser les caractéristiques et de définir le traitement.

- **Etablir le protocole de traitement**
Après consultation et observation, lister et enregistrer les données personnelles du client, les détails du traitement. Ces données doivent être validées par la signature du client. Une photo du client permettra d'assurer un suivi post traitement.
- **Sélectionner les paramètres de traitement**
Selon les conditions (type de peau, âge, degré léger de vieillissement, etc.) des parties à traiter (visage, corps) et selon les résultats attendus du traitement, sélectionner les paramètres du traitement sur l'interface de choix des paramètres et contrôler le rendement énergétique.
- **Test de traitement**
Pour effectuer un test de traitement, appuyer sur le bouton Marche / Arrêt, sélectionner le type de peau relatif à la partie moyenne de l'avant bras. En contactant les roulettes de la pièce à main avec la peau du client, actionner le bouton RF et procéder au traitement, tout en demandant au client ses sensations et en observant les réactions cutanées de la partie traitée. De façon générale, le client ressent de la chaleur. S'il ne ressent rien, augmenter doucement les paramètres jusqu'à obtention de cette sensation de chaleur.
- **Ajustement des paramètres**
Selon les sensations du client, ajuster les paramètres de traitement. Le client ne doit pas ressentir de douleur mais une chaleur tiède. Si le client sent un engourdissement ou une irritation, arrêter immédiatement le traitement.

4.3.2. Pendant le traitement

- **Interroger**
Lors du traitement, toujours demander les impressions du client (sensation? douleur? chaleur?). Selon les réponses du client, et si nécessaire, ajuster les paramètres.
- **Observer**
Lors du traitement, une rougeur de la peau ou un petit oedème peut être observé sur la partie traitée. Ajuster les paramètres du traitement si nécessaire pour éviter tout gonflement.
- **Note**
L'opérateur peut poursuivre le traitement et ajuster les paramètres. Il peut alors atteindre un effet en évitant des traitements inefficaces (énergie RF trop faible). Par exemple, lors du test, les paramètres sont définis pour un traitement à une température de 37°. Afin d'atteindre un résultat idéal, l'opérateur peut augmenter progressivement l'énergie en s'assurant du ressenti du client, jusqu'à ce que la température de la peau ait atteint 40-48°.

4.3.3. Après le traitement

- 1) Nettoyer la partie traitée
- 2) Pendant et après le traitement, enregistrer les paramètres de traitement et les réactions des parties traitées
- 3) Eteindre l'alimentation; nettoyer les têtes de travail et les résidus.
- 4) Expliquer au client les soins post traitement; définir la date de la prochaine séance; assurer un suivi avec le client.



ATTENTION

pour éviter toute surchauffe de la peau du client, écarter les pièces à main du client et relâcher le bouton d'actionnement de ces pièces à main.

4.4. Notes pour traitement thérapeutique

Le client qui va recevoir le traitement ne peut manger 1 heure avant et deux heures après le traitement. Un cycle de 10 à 15 traitement de 35 minutes chacune est préconisé. Après ce cycle, les séances d'entretien peuvent être dispensées à raison d'une par mois.

Après chaque traitement, le client constatera un léger lifting de la silhouette et une peau plus douce. Ces effets seront davantage visibles après 5 ou 6 séances. Le déroulement du traitement, sa durée et son objectif, sont définis selon l'embonpoint du client. Un nutritionniste analysera et suggérera un meilleur mode de vie et des habitudes alimentaires plus saines.

4.5. Les principaux facteurs d'action du traitement

1. Le degré de vieillissement de la peau, la quantité de cellulite et l'âge du client.
2. La densité d'énergie du traitement (intensité RF et intensité du palper rouler)
3. Le temps de traitement (???? Incompréhensible!!!!)

4.6. Notes de post traitement

(!!!! Complètement incompréhensible!!!!)

Entretien et dépannage

5.1. Entretien

La machine est équipée de 4 filtres. Les filtres doivent être nettoyés chaque jour (après 8h de travail) lorsqu'ils sont secs.

De façon générale, nettoyer les éléments du filtres toutes les 50h. La partie du milieu doit être nettoyée avec une serviette en papier humide.

5.2. Dépannage

Que faire s'il un problème se présente?

- La machine est elle connecté à une alimentation électrique?
- Les fiches et prises sont elles alimentées?
- La machine est elle sous tension?
- Les fusibles sont ils fonctionnels?
- Les filtres sont ils propres et l'anneau d'étanchéité bien positionné?
- Les tuyaux sont ils bouchés? (Remplacer les tuyaux)* les tuyaux sont il bien connectés sur les bras mobiles? (les re connecter si nécessaire)
- Le connecteur des tuyaux est il bien connecté à la tête de travail?
- Si l'écran LCD de l'élément principal ne s'affiche pas correctement, re connecter l'élément principal et le tuyau.



ATTENTION

1. *Si la machine est destinée à ne pas fonctionner pour une longue période, déconnecter la machine de l'alimentation électrique*
2. *Puisque la machine est actionnée par électricité, toute réparation doit être confiée à un professionnel compétent.*
3. *La machine devrait être arrêtée après deux traitements et refroidie pendant 5 minutes minimum.*
4. *Après chaque traitement, ne pas éteindre complètement la machine. Laisser la machine se refroidir entre 5 à 10 minutes.*
5. *Le travail en continu de la machine ne peut excéder 8 heures.*

Spécificités

Model	MED-360+
Bi-Polar RF power	≤ 50 W, 13 MHz
Output degree	5°C ~ -5°C
RF energy	1-50 W/cm ³
Vacuum suction capacity	25 cum/h
Treated area of working head (RM1)	Blue-light: 10 levels Cooling system: 10 levels Negative pressure: 10 levels Inhale and Deflate: 10 levels High clarity LCD with touch panel 3.5"
Treated area of working head (RM2)	Red-light Adjustable RF Rolling massage: 4 rotating way Negative pressure: 10 levels Inhale and Deflate: 10 levels Keys function
Treated area of working head (RM3)	Red-light Adjustable RF Negative pressure: 10 levels Inhale and Deflate: 10 levels
Treated area of working head (RM4)	Adjustable RF Negative pressure: 10 levels Inhale and Deflate: 10 levels
Communication for man-machine	High clarity LCD with touch panel 8.4"
Weight	60 kg

Fiche personnelle

7.1. La fiche personnelle de données client

Informations personnelles

Nom Sexe Date de naissance

Téléphone Adresse

Profession

Cycle de traitement et raison

Habitudes de vie

Régime Tabac Liposuccion

Exercices physiques réguliers Usage de nutriment

Antécédent Maladie infectieuse / Cancer / Thrombose / Maladie hépatique/
Maladie cutanée / Pression psychologique / Arthrite / Dysfonctionnement du
système circulatoire / Phlébite / Autres



19, rue de la Princesse.
B-7130 Binche
Belgium

Tél. +32 (0)64 369 267
France **N° VERT 0 800 913 514**
Mobile +32 (0)475 257 507

jm.libert@libinvest.com

